



Catetere Multifunzione


POLIPECTOMY MULTIFUNCTIONAL CATHETER

Meditalia®



Disponibile anche rotante
Available rotatable

Meditalia®

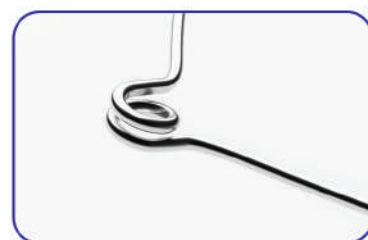

Punta arrotondata atraumatica
Atraumatic rounded tip

CATETERE MULTIFUNZIONE POLIPECTOMY MULTI ACTION CATHETER

Catetere multifunzione ansa + rete per simultanea resezione mediante ansa da polipectomia collegata ad unità elettrochirurgica e ansa a rete per recupero post resezione.

Multiaction catheter snare + loop net used for simultaneous resection with polypectomy snares connected to an electrosurgical unit and loopnet for retrieval after resection.

Manico ergonomico e catetere doppio lume. L'ansa da polipectomia è disponibile nella morfologia a caldo e a freddo. Alta flessibilità della rete da recupero e adeguata manovrabilità durante la procedura di apertura. È l'unico strumento che permette la simultanea resezione ed estrazione durante procedure di polipectomia.

Ergonomic handle - double lumen. Hot and Cold polypectomy snare available. High flexibility. Unique instrument that permits simultaneous resection during polypectomy procedure.

Products info

MULTIACTION CATHETER WITH HOT SNARE AND LOOP NET

References	Morphology	Working length	Sheath diameter	Diam. net	Loop diameter	Loop shape
MED-194-MUL	snare-loop net	230 cm	3,1 mm	25x45 mm	15 mm	Oval
MED-195-MUL	snare-loop net	230 cm	3,1 mm	30x60 mm	20 mm	Oval
MED-196-MUL	snare-loop net	230 cm	3,1 mm	25x45 mm	15 mm	Oval
MED-197-MUL	snare-loop net	230 cm	3,1 mm	30x60 mm	30 mm	Oval

MULTIACTION CATHETER WITH COLD SNARE AND LOOP NET

References	Morphology	Working length	Sheath diameter	Diam. net	Loop diameter	Loop shape
MED-190-MUL	snare-loop net	230 cm	3,1 mm	15x25 mm	10 mm	Hexagonal
MED-191-MUL	snare-loop net	230 cm	3,1 mm	15x25 mm	10 mm	Diamond