




ITABrush®

cleaning brush

ITABrush®

www.meditaliasas.it

Meditalia®

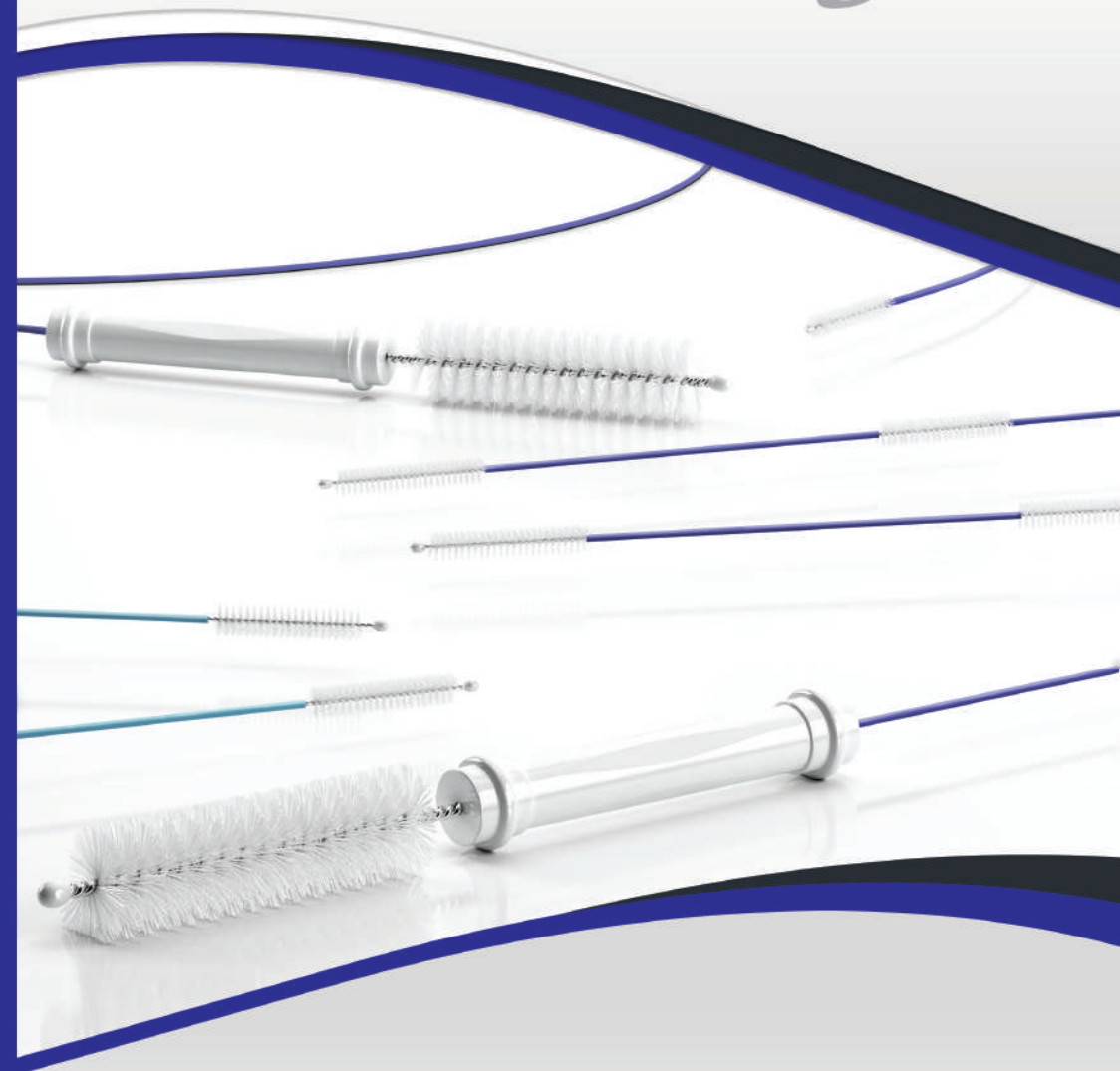


Spazzolini per pulizia
CLEANING BRUSHES

Meditalia®

ITABrush®

3Clean®

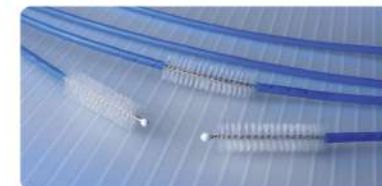

Products info

References	Working length	Sheath diameter	Brush diameter	Brush length	Compatibility
MED-183- BRU	160 cm	1,8 mm	3 mm	2 cm	Bioptic
MED-184- BRU	230 cm	1,8 mm	5,5 mm	2 cm	Bioptic

Spazzolino per pulizia canale bioptico a tripla spazzola. Setole ad alta densità in nylon, punta arrotondata atraumatica per preservare il canale con una guaina flessibile per facilitarli il passaggio. Lunghezza compatibile con broncoscopio, gastroscopio e colonscopio

Triple brush cleaning brush for biopsy channels. High density bristles in nylon. Atraumatic round tip to preserve the channel with flexible sheath to facilitate the passage through the biopsy channel. Length compatible with bronchoscope, gastroscope and colonoscope

Meditalia®

SPAZZOLINI PER LAVAGGIO

CLEANING BRUSHES



Esclusivo spazzolino che permette un simultaneo lavaggio del canale aria/acqua - canale bioptico. Setola ad alta densità in nylon.

Punta arrotondata atraumatica per preservare il canale con guaina flessibile per facilitarne il passaggio

Exclusive brush that allows a simultaneous washing of the air-water channel / biopsy channel. High density bristles in nylon.

Atraumatic round tip to preserve the channel with flexible sheath to facilitate the passage through the channel

Products info

References	Working length	Sheath diameter	Brush diameter	Brush length	Compatibility
MED-161- BRU	160 cm	1,8 mm	3 mm	2 cm	Bioptic
MED-162- BRU	230 cm	1,8 mm	5,5 mm	2 cm	Bioptic
MED-223- BRU	260 cm	1,8 mm	5,5 mm	2 cm	Bioptic
MED-163- BRU	15 cm	1,8 mm	12 mm	4 cm	Valve
MED-164- BRU	230 cm	1,8 mm	12-5,5 mm	4-2 cm	Valve-biopic



Villius®



References	Working length	Sheath diameter	Brush diameter	Brush length	Compatibility
------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	---------------

MED-220- BRU	265 cm	1,8 mm	5 mm	35 cm	Biopic
--------------	--------	--------	------	-------	--------

Catetere in pebax anti deformante e punta rotonda atraumatica. Esclusiva spazzola villosa ottimizza il lavaggio del canale bioptico. Misure compatibili per enteroscopia

Anti-deforming pebax catheter and atraumatic round tip. Exclusive villus brush type that permits the best washing of the biopsy channel. Length compatible with enteroscope

4Clean®



References	Working length	Sheath diameter	Brush diameter	Brush length	Compatibility
------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	---------------

MED-224- BRU	230 cm	1,8 mm	5,5 mm	2 cm	Biopic
--------------	--------	--------	--------	------	--------

Spazzolino per pulizia canale bioptico a quadrupla spazzola. Setole ad alta densità in nylon. Punta arrotondata atraumatica per preservare il canale con guaina flessibile per facilitarli il passaggio. Lunghezza compatibile con broncoscopio, gastroscopio e colonscopio

Cleaning brush for biopsy channel with quadruple brush. High density bristles in nylon. Atraumatic round tip to preserve the channel with flexible sheath to facilitate the passage through the biopsy channel. Length compatible with bronchoscope, gastroscope and colonoscope

Meditalia®

www.meditaliasas.it